




در دهانیان احساس کردید و با صورت شنیدن صدای "کلیک" و "سوٹ" نفس کشیدن به داخل را قطع نکرد پس از مصرف این دارو از آزاد شدن دور دارو به نفس کشیدن خود ادامه دهد.



۴- سینکروبریت از روی دهانیان برداشته و به مدت ۱۰ ثانیه و یا تا زمانیکه برايان مقدور است نفس خود را نگه دارد، بسیں به آرامی نفسان را بیرون گردند.



مرحله سوم: ستن
بعد از استفاده از سینکروبریت، دستگاه را به سمت بالا نگه داشته و در پوش دهانه را سریعاً بینندید.

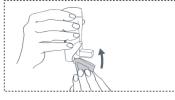

استفاده از دوز دیگر دارو
برای مصرف دو بعدی از سینکروبریت، مراحل ۱ تا ۳ را دوباره تکرار نمایند.
پس از مصرف دارو دهان را بآب بخوبی آبکنی کرده و آن را بیرون بینندید.

نهاده راهنمای:
همواره در پوش دهانه را سریعاً پس از مصرف هر یافی بینندید. این کار سینکروبریت را برای مصرف دوز بعدی آماده نگه می‌دارد.

چکونه از اتمام دارو اطمینان حاصل شود؟

سینکروبریت دارای شناگر دوز است که در پشت دستگاه قرار گرفته است. شناگر دوز عدد اف های باقی مانده دارو را شناسان می‌دهد. سینکروبریت چند دارد و در پنجه ره شناگر دوز نشان میدهد که بینگر کل تعداد دوزهای موجود است.




برای آزادسازی یاف بعدي دارو مراحل ۱ تا ۳ را دوباره تکرار نمایید. بعد از آن دستگاه ۲ یاف از دارو، دستگاه براي مصرف آماده می‌باشد.

- آزمایش اسری: تهای برای زمانی است که اسری برای اولین بار استفاده می‌شود و باه مدت بیش از یک هفته از آن استفاده نشود.
- همواره در پوش دهانه را آرامی باز نمایند.
- همیشه بالا صله بعد از آزمایش اسری، در پوش دهانه را بینندید تا باری مجدد استفاده نمایند.
- هنگام مصرف دارو از دکمه ایجادکننده استفاده نکنید، زیرا اگهه از آن دارو را بیندیشند آرامی باشند و آماده مصرف شوند.


۵- نحوه استفاده از سینکروبریت:
مرحله اول: تکان دادن و باز کردن دستگاه سینکروبریت را همانطور که در شکل نشان داد شده از کاره دستگاه نگه دارید.

اطمینان حاصل نمایید که اگذشتان از در پوش دهانه در پوش و با نکته ایجادکننده دارو که در پشت دستگاه تعییه شده است، تمام نداده.

سینکروبریت را در حالی که در پوش دهانه بسته است بخوبی تکان داده سپس اگذشتان را بر روی شیارهای کارا در پوش دهانه قرار دهد و به آرامی در پوش را به سمت پائین بکشید.

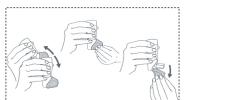

مرحله دوم: استنشاق
۱- در حالی که اسنانه اید و انتشته اید سینکروبریت را به سمت بالا نگه دارید.

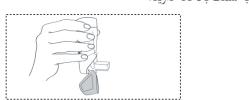

۲- تا جایی که برايان مقدور است به طور طبیعی از راه دهان نفس خود را بیرون دهد.



۳- بستن دهانه دستگاه
پس از اسری کردن هر یاف دارو، در پوش دهانه را مجدداً بخوبی آن قرار دهد.




سینکروبریت به محض انجام عمل دم توسيط سیاریک دوز دارو را به صورت خودکار از آن می‌کند. هنگامی که دارو را

روش استفاده از سینکروبریت


الف- آزمایش اولیه سینکروبریت:
اگر برای اولیه بار از سینکروبریت استفاده می‌کنید یا اگر به مدت یک هفته باشند، از آن استفاده نکرده‌اند، آنرا بخوبی کان داده و یاف از دارو را در هوای اسری کنید تا آماده مصرف شوند.

- تکان دادن و باز نمودن
سینکروبریت را همانطور که در توصیه مشاهده می‌کنید از دو طرف نگه دارید.

اطمینان حاصل نمایید که اگذشتان روی در پوش دهانه قرار نگرفته و بینرا کمکه ایجادکننده دارو که در پشت دستگاه قرار دارد، تمام نداشته باشد.

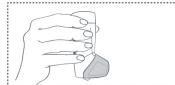


سینکروبریت را در حالی که در پوش دهانه بسته است بخوبی تکان داده سپس در پوش دهانه را در حالی که اگذشتان روی شیارهای کارا نداشته باشد، به آرامی به سمت پائین بکشید.

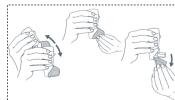


۲- آزادسازی دوز آزمایشی دارو
سینکروبریت را به صورت اسناده به سمت بالا نگه داشته و دهانه را در پوش خودتان نگه دارید.

با فشار دادن کمکه ایجادکننده دارو اکه در پشت سینکروبریت، پائین تر از شناگر دوز تعییه شده است به سمت پائین، یک یاف از دارو را آرد مانند.

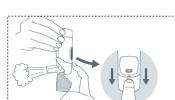

۳- بستن دهانه دستگاه
پس از اسری کردن هر یاف دارو، در پوش دهانه را مجدداً بخوبی آن قرار دهد.

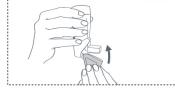

سینکروبریت به محض انجام عمل دم توسيط سیاریک دوز دارو را به صورت خودکار از آن می‌کند. هنگامی که دارو را

برگ راهنمای مصرف بیمار
لطفاً قبل از استفاده از اسری، این برگ راهنمای را به طور کامل مطالعه نمایید.



۵۰ سروفلو (SB) سینکروبریت

۱۲۵ سروفلو (SB) سینکروبریت

۲۵۰ سروفلو (SB) سینکروبریت

آزادسازی دارو همزمان با استنشاق
دارای **شمایگر** دور



درباره سینکروبریت

سینکروبریت یک اسری استنشاقی با کارکردی اسان است بطوریکه هنگام تنفس، همزمان با جریان دم دارو به صورت خودکار از آن شود.

سینکروبریت دارای شناگر دوز است که به سیما کمک می‌کند تا از دوزهای باقی مانده، آگاهی باید.

بخش های سینکروبریت

